




**GLOBUS**  
MEDICAL

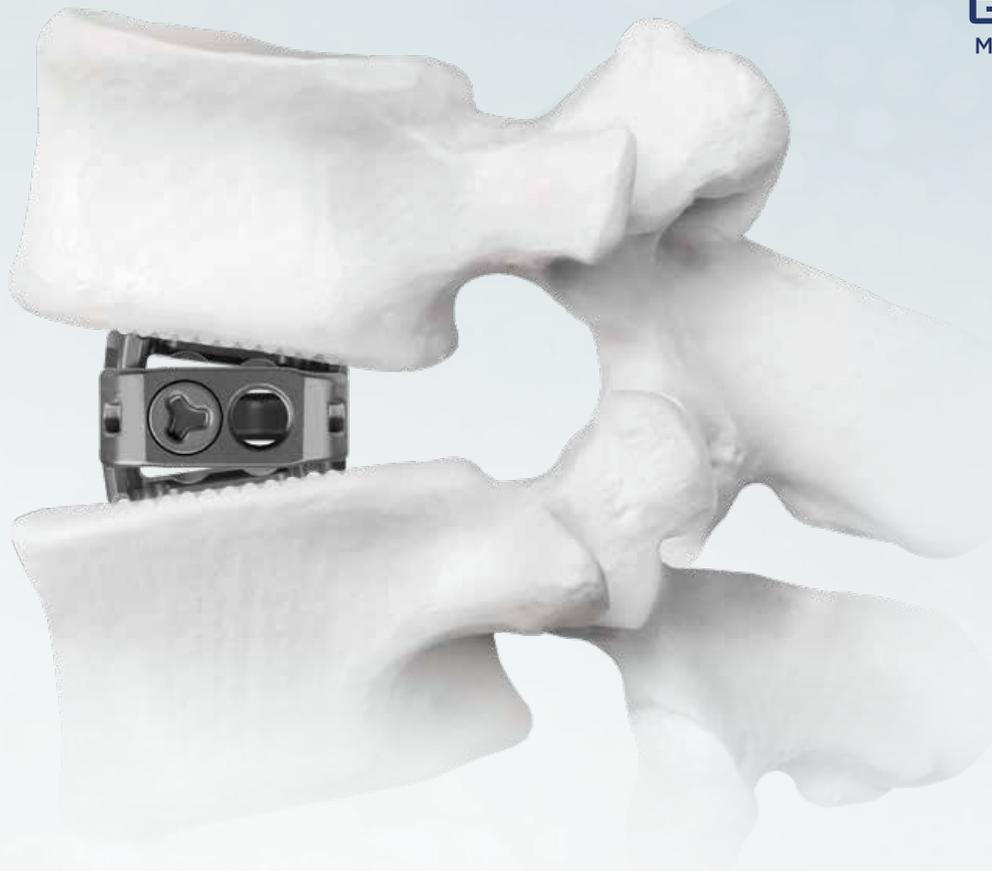

# RISE<sup>®</sup> -L

O Definitivo Dispositivo  
de Fusão Intersomática Lombar




# RISE<sup>®</sup>-L

O DEFINITIVO DISPOSITIVO DE FUSÃO INTERSOMÁTICA LOMBAR

RISE<sup>®</sup>-L é projetado para:

**MINIMIZAR IMPACTAÇÃO**  
**MAXIMIZAR A DESCOMPRESSÃO INDIRETA**  
**OTIMIZAR A FUSÃO**

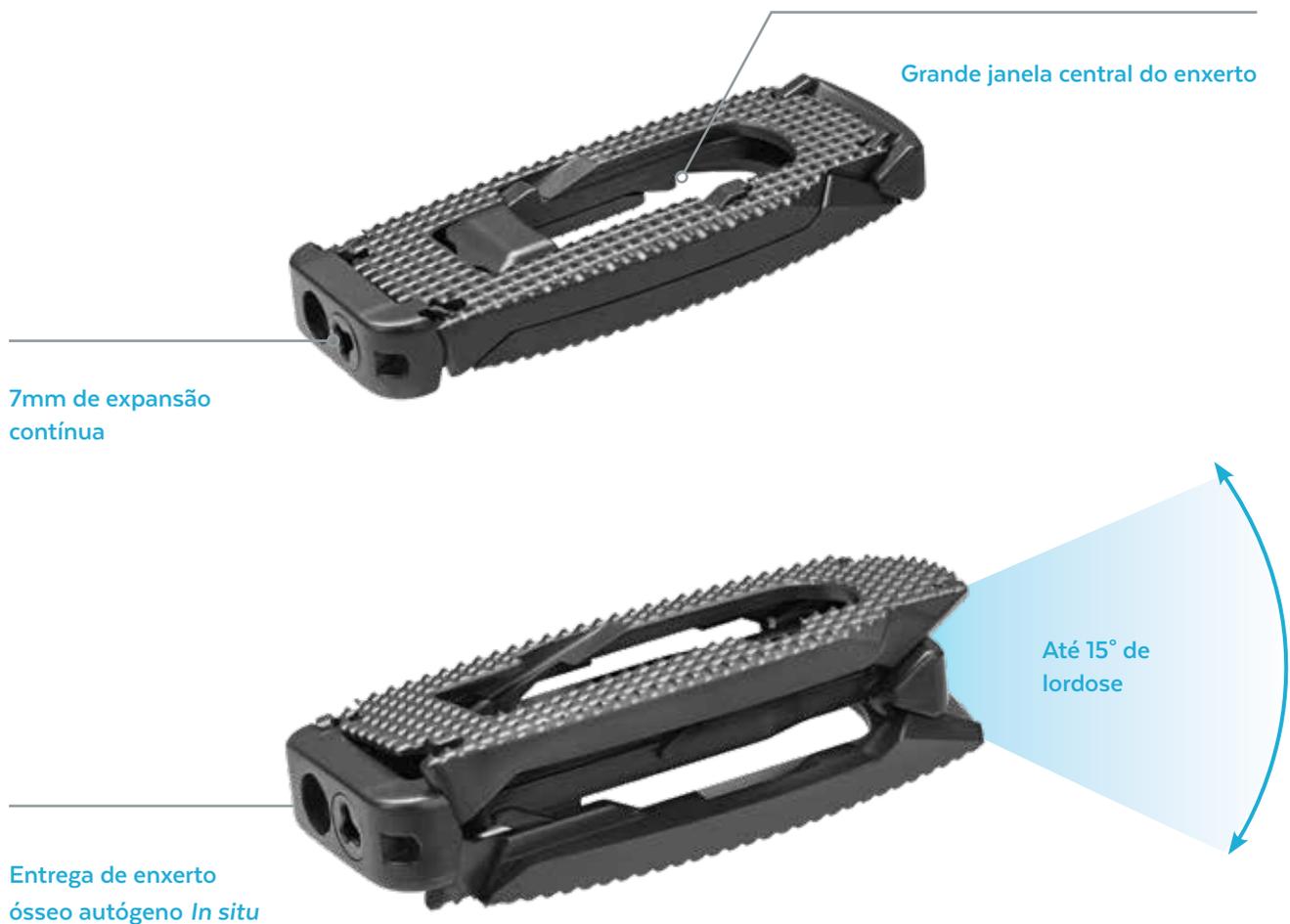


A lordose ajustável permite um ajuste *in situ* contínuo de até 15°, enquanto permite a descompressão indireta.

# SUBSIDÊNCIA REDUZIDA

Os pacientes tratados em nível um com RISE®-L apresentaram menor taxa de subsidência em comparação aos pacientes tratados com espaçadores estáticos.<sup>1</sup>



Imagens de RISE®-L na L4-L5 em (A) pré-operatório e (B) 12-meses pós-operatório.

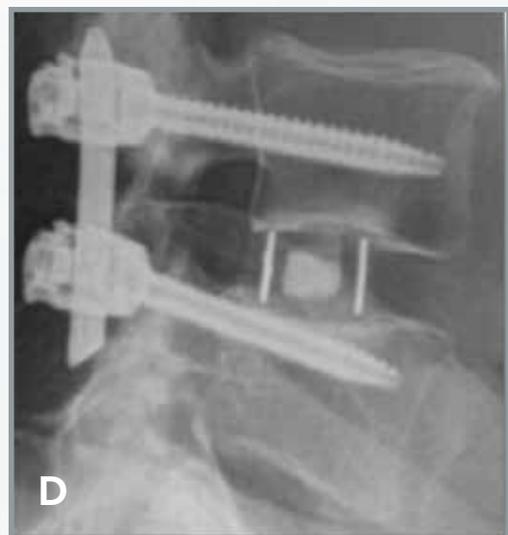

Imagens do espaçador estático na L3-L4 em (C) pré-operatório e (D) 12-meses pós-operatório.

# LORDOSE SEGMENTAL

Os pacientes tratados em nível um com RISE®-L apresentaram aumento na lordose segmental em comparação aos pacientes tratados com espaçadores estáticos.<sup>1</sup>



Imagem lateral pré-operatória



Imagem lateral pós-operatória



## INSERIR

Inserir a uma altura minimizada para ajudar a reduzir o trauma da placa terminal



## EXPANDIR

Maximizar a descompressão indireta através da expansão controlada




## FUNDIR

Otimizar o potencial de fusão entregando o enxerto ósseo *in situ*

# OFERTA ABRANGENTE DE IMPLANTE

## Opções de footprint

- 2 larguras: 18mm e 22mm
- 4 comprimentos: 45-60mm, em incrementos de 5mm

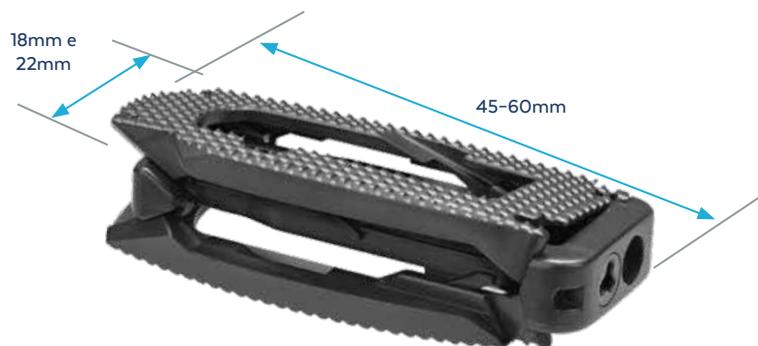

## Faixa de altura

- 7-14mm



## Perfil Sagital



3-15° Lordótico



Globus Medical  
Valley Forge Business Center  
2560 General Armistead Avenue  
Audubon, PA 19403  
[www.globusmedical.com](http://www.globusmedical.com)

Serviço de assistência ao consumidor:  
Telefone 1-866-GLOBUS1 (ou 1-866-456-2871)  
Fax 1-866-GLOBUS3 (ou 1-866-456-2873)